

HARKINDO™ SCREW DRIVER

ハーキンドスクリュードライバー

専用スクリュー不要でメーカー純正スクリューを
そのままに角度補正できる画期的なドライバー

ストレートタイプ

アンギュレーションタイプ


マテリアル（素材）
硬くて丈夫なステンレス製です

シャンク

シャンク部分を従来より短くすることで
視野が広がり、開口量が少ない症例に対応

サイズは2種類

ストレートタイプ、アンギュレーションタイプともにショート、ロングの2種類
（詳しくは裏面ラインナップをご確認下さい）

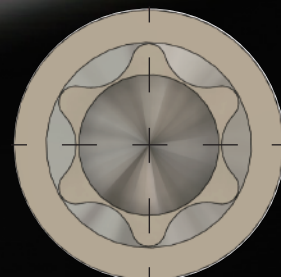

ヘキサロビューロ穴

No.6 を有するスクリューに対応

【対応メーカー】

京セラ、ストローマン、GC、レイIIベース

Product Feature

開口量が少ない症例に対応

シャンク部が短い設計で作業長を長く確保。開口量が少ない症例に対応できます。

ウィークポイントの設定


過剰にトルクがかかると、スクリュー、アバットメント、及びインプラントへ悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、ドライバーにウィークポイントを設けた安全設計になっています。

アンギュレーションアクセスホール対応

ハーキンドスクリュードライバーのアンギュレーションタイプは、京セラ、ストローマン、GC、レイIIベースなどの純正スクリューを、そのままに20°角度補正して締結することができます。

ハーキンドチタンベースIIは、ハーキンドアバットメントスクリュー (5L) を使用することで、無加工でアクセスホールを20°傾斜させることが可能です。(図1)

ハーキンドチタンベースIIを機械加工することで、アクセスホールを20°傾斜させることが可能です。(図2)

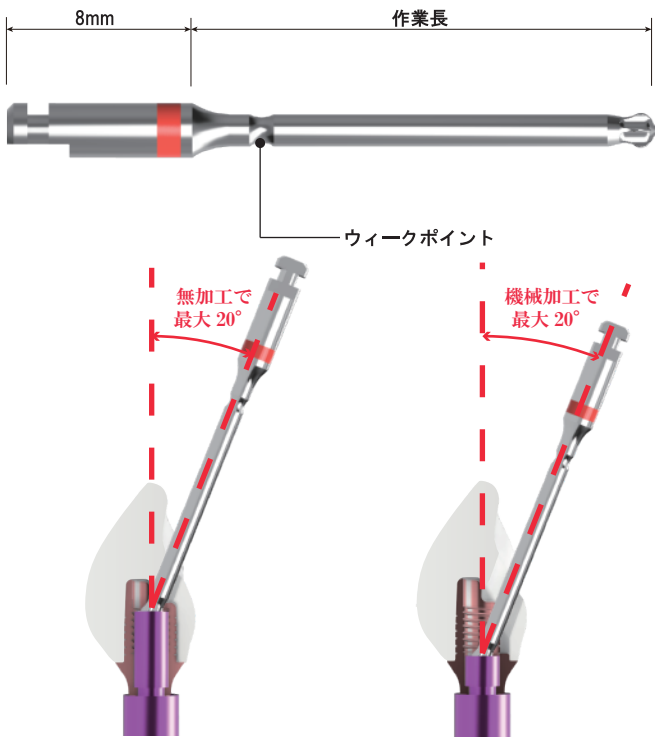


(図1) チタンベース無加工 5L スクリューアンギュレーション (図2) チタンベース機械加工 2L スクリューアンギュレーション

一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具
薬事届出番号 11B2X10051000011


Line up

ストレートタイプ

* 最大トルク 35Ncm で締結して下さい。

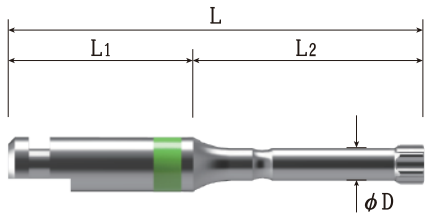

HEXAL06-ST-S

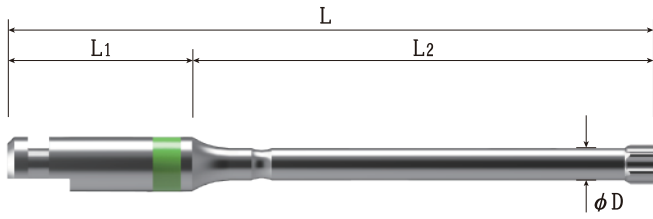


HEXAL06-ST-L


アンギュレーションタイプ

* 最大トルク 20Ncm で締結して下さい。(20Ncm 以上のトルクで20回以上使用すると変形の恐れがあります)

* エントリー軸最大 20° 傾斜まで可能です。

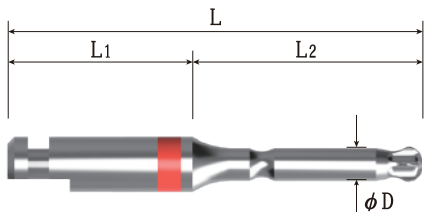

HEXAL06-ANG-S

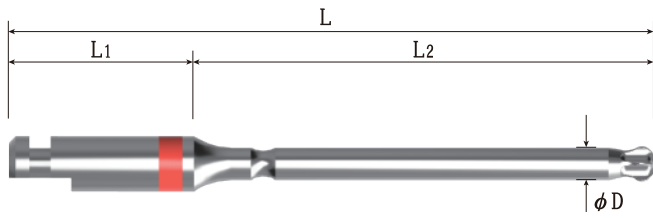

HEXAL06-ANG-L

(単位 mm)

商品名	商品コード	税抜価格	径 φD	全長 L	シャンク長 L1	作業長 L2
HEXAL06-ST-S	EHSD5024	10,000	φ 1.4	18.0	8.0	10.0
HEXAL06-ST-L	EHSD5031	10,000	φ 1.4	28.0	8.0	20.0
HEXAL06-ANG-S	EHSD5048	12,000	φ 1.4	18.0	8.0	10.0
HEXAL06-ANG-L	EHSD5055	12,000	φ 1.4	28.0	8.0	20.0

詳しい製品についてのお問合せ

HARKINDO™

株式会社 E-Joint 営業開発部ハーキンド
HP : <https://www.harkindo.jp>
TEL : 04-2937-3976



製造販売元



製造元

株式会社 E-Joint
〒359-1116
埼玉県所沢市東町 10-16 廣澤ビル 3F
TEL : 04-2937-3972 HP : <https://www.e-joint.co.jp>
製造販売業許可番号 11B2X10051

株式会社 シオダ

